



APS[®]

L'EFFICACIA DELLA TECNOLOGIA MEDICA

Soluzione rivoluzionaria e non chirurgica, per rimodellare viso e corpo, con applicazioni specifiche per gli inestetismi della pelle




CERTIFIED
ELECTROMEDICAL
TECHNOLOGY

NOVITÀ SKIN PATTING[®]

Sicuro, Efficace, Made in Italy

SKIN PATTING® by APS® è la **novità assoluta della medicina estetica** per il trattamento degli inestetismi della pelle di viso e corpo, una tecnologia non chirurgica unica al mondo, che vanta **3 brevetti mondiali** e rappresenta un'**innovazione 100% italiana**.

Frutto di un'esperienza di oltre 15 anni in campo dermatologico, SKIN PATTING® nasce grazie a un progetto di ricerca sviluppato all'interno di un **Polo Scientifico Tecnologico**, sede del CNR, dell'ENEA e dell'Università di Bologna.

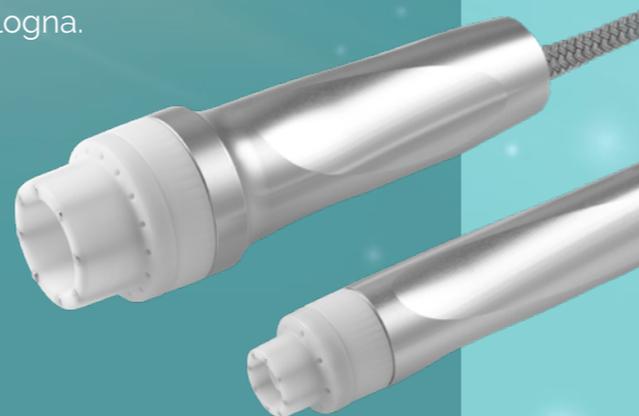

Come funziona SKIN PATTING®?

La tecnologia SKIN PATTING® combina l'azione contemporanea della micro-dermoincisione e dell'onda pressoria per ottenere **diverse azioni dinamico-ristrutturanti**:

- 1** incremento immediato del microcircolo sanguigno, per un'**ossigenazione dei tessuti**
- 2** stimolazione del metabolismo cellulare nel tessuto, favorendo la **veicolazione di principi attivi**
- 3** stimolazione dei fibroblasti in maniera meccanica e riparatoria, per un **aumento della produzione di collagene ed elastina**.



DOPPI CONI



PRIMA



DOPO

60 anni, 1 seduta



PRIMA



DOPO

71 anni, 4 sedute

SKIN PATTING®

concentra in un unico strumento portatile di 4,7 kg numerose azioni dinamico-ristrutturanti, tra cui:

- Micro-dermoinceisione controllata
- Stimolazione a onde pressorie
- Veicolazione transdermica
- Sistema vacuum
- Radiofrequenza frazionata
- Elettrostimolazione
- Foto-stimolazione

Il risultato è una vera rigenerazione cellulare, che dona tono ed elasticità anche in zone difficili come collo e braccia.



PRIMA



DOPO

28 anni, 5 sedute



PRIMA




DOPO

56 anni, 6 sedute

AZIONE STIMOLANTE



EFFETTO RIGENERANTE

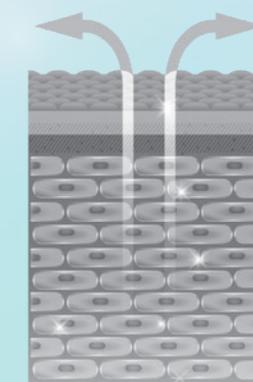

SKIN PATTING® è il metodo meno invasivo e più innovativo per ottenere risultati in appena **6-8 settimane** su tutti gli inestetismi di viso e corpo.



Dicono di noi:

"Con Skin Patting abbiamo ottenuto risultati importanti nel trattamento delle lassità e delle cicatrici, con grande soddisfazione dei nostri pazienti."



Dott. Rodolfo Gretter
Medico Estetico Brescia

"Estremamente efficace nel contrastare la lassità cutanea, migliorando tono ed elasticità della pelle in distretti difficili come il collo e le braccia, con risultati rapidamente visibili."



Dr. Maria Grazia Caputo
Medico Estetico Roma

"APS è un'apparecchiatura innovativa che grazie allo Skin Patting stimola e crea centinaia di microtraumi, ideale in associazione al PRP per amplificare la risposta proliferativa e rigenerare i tessuti."



Dr. Marco Scala
Specialista Maxillo Facciale
Resp. Medicina rigenerativa
J Medical

"Questo innovativo sistema corregge molteplici imperfezioni di viso e corpo, senza utilizzo di aghi e con un effetto "bellezza" immediato che rende le pazienti ancora più entusiaste."



Dr. Sara Berzigotti
Medico Estetico Riccione

"APS attua un trattamento non invasivo e applicabile in tutte le stagioni e su tutti i distretti corporei dove il risultato è frutto di un'intensa attivazione funzionale con risultati tangibili in breve tempo e duraturi."



Dr. Giuliana Bottegoni
Medico Estetico Chieti

"Dopo oltre 30 anni in medicina estetica e quasi 15 anni di esperienza nel settore con radiofrequenza bipolare, siamo approdati nel nostro poliambulatorio allo Skin Patting, risultati decisamente positivi già fin dalle prime applicazioni su: viso, collo, décolleté, addome e interno coscia. Pazienti soddisfatti al 99% e buoni risultati anche in pazienti eccessivamente magri o addirittura sottopeso con grave lassità cutanea."



Dr. Giovanni Giovannini
Medico Estetico Lugo

Un investimento minimo per un ritorno immediato ed effetti subito visibili

SKIN PATTING®

è un device innovativo, unico al mondo e di altissima qualità, vantaggioso sia in termini di risultati, che in termini di investimento.



INVESTIMENTO CONTENUTO

A fronte di un acquisto misurato si ha un **ritorno in brevissimo tempo.**



MINIMO INGOMBRO

Diverse azioni dinamico-ristrutturanti **in un unico strumento portatile di appena 4,7 kg.**



EFFETTI VISIBILI

I trattamenti su inestetismi di viso e corpo hanno **risultati visibili già dalla prima seduta.**

Un'unica soluzione a **numerosi problemi estetici**, dall'ipotonia cutanea alla cellulite, dall'acne attiva, fino all'adiposità localizzata, alle cicatrici e alle smagliature.



APS®

Equipaggiamento:



APS



Valigetta



Trolley



Coppa Corpo (Led Infrarossi)



Coppa Viso (Led Rosso e Blu)



Coppa Perioculare



Coppa Tricologica (OPTIONAL)



Manipolo Viso



Manipolo Corpo



Testine Viso e Corpo



Occhiali protettivi

Scheda Tecnica

Modello	APS
Tensione	230 Vac
Frequenza nominale	50/60 Hz
Potenza Max assorbita	125 VA
Corrente Max assorbita	540 mA
Classe di sicurezza	BF
Classe di protezione	I
Fusibili	2 x T2AL250V
Tensione in uscita radiofrequenza	100 Vpp with 1 K load
Potenza in uscita con RF attivo	30 W
Tensione in uscita elettrostimolatore	80 Vpp with 1 K load
Tempo attivazione elettrostimolatore	300 us
Frequenza modalità elettrostimolatore	2 Hz
Frequenza modalità radiofrequenza	0,51 MHz
Frequenza battito testina Patting	6 Hz
Aspirazione massima Vacuum	400 mmHg
Lunghezza d'onda Led Blu	465 nm
Lunghezza d'onda Led Rosso	632 nm
Lunghezza d'onda Led infrarosso	860 nm
Dimensioni unità di controllo	380 x 300 x 240 m
Peso	4.7 Kg

APS[®]



APS[®] - **Parco Tecnologico E. Torricelli**,
Via A. Einstein, 8 c/o
48018 Faenza (RA) | +39 0546 46193
www.apsdevice.com

